

Fairywill

Szonikus fogkefe
FW-E11



HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Köszönjük, hogy a Fairywill P80 szonikus fogkefét választotta. Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és a későbbi használathoz tartsa biztonságos helyen.

1. Jellemzők:

- Vízálló és csúszásmentes kialakítás.
- A cserélhető kefe fejek egyedülálló 3D sörtékkel és sörték cseréjére emlékeztető funkcióval segítenek a fehérebb és egészségesebb fogak megőrzésében.
- A nagyfrekvenciás rezgés hatékonyan távolítja el a lepedéket, mélytisztítást biztosít a fogak és az íny számára, és megelőzi az ínygyulladást.
- USB-töltés, utazásbarát és kompatibilis a globális feszültséggel.
- Alacsony töltöttségi szint emlékeztető funkció, ha az akkumulátor feszültsége alacsony, a kijelző gyorsan villog, vagy a fogkefe nem tud bekapcsolni használat közben, emlékeztetve Önt a fogkefe újratöltésére.
- Intelligens 2 perces időzítő intervallumos szünettel, amely 30 másodpercenként emlékezteti Önt a fogmosási pozíció megváltoztatására.
- 5 üzemmód áll rendelkezésre: A fogkefébe épített Fehér, Tiszta, Érzékeny, Polírozó és Masszázs beállítások. A fogkefébe egy üzemmód-memória funkciót is beépítettek, ami azt jelenti, hogy amikor bekapcsolja a fogkefét, az alapértelmezett kezdeti üzemmód ugyanaz marad, mint amit a fogkefe legutóbbi kikapcsolásakor beállított.

2. Kefés alkatrészek:

1. Kefefej
2. ON/OFF gomb
3. Fehér
4. Tiszta
5. Érzékeny
6. Lengyel
7. Masszázs
8. Töltés jelző
9. Fogantyú
10. Töltőport

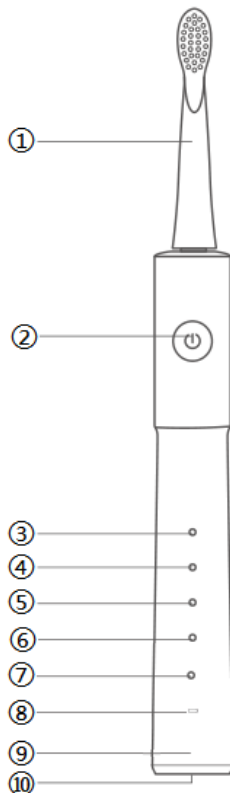

3. A fogkefe használatával kapcsolatos tevékenységek:

☆ Fogkefe használata

- Helyezze be a kefefejet a fogantyúba, és győződjön meg róla, hogy a megfelelő pozícióban van rögzítve.
- Kapcsolja be a fogkefét a "Power" gomb megnyomásával.
- A "Power" gomb megnyomásával válthat az 5 üzemmód ("White", "Clean", "Sensitive", "Polish" és "Massage") között.
- Nedvesítse be a kefe sörtéit, és vigyen fel megfelelő mennyiségű fogkrémet.
- Helyezze a fogkrém sörtéit a fogakhoz, enyhe szögben az ínyvonal felé.

- A kefefejet finoman csúsztassa végig a fogak elülső és hátsó részén, valamint a fogak összes rágófelületén. A kefének minimális nyomással kell siklania a fogakon. Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a fogakra/ínyre, és ne alkalmazza a sörtéket a száj egy területére hosszabb ideig.
- A fogkefe 2 perces intelligens időzítővel rendelkezik, mivel a fogorvosok ezt az időt javasolják a fogmosás optimális idejeként, és minden 30 másodperc után szünet emlékeztet arra, hogy a száj egy másik kvadránsára kell áttérni.
- Ha szünetet érez, lépjen a következő szakaszra, és a fogkefe 2 perc után automatikusan kikapcsol.
- A fogkrém kifröccsenésének elkerülése érdekében csak akkor kapcsolja be a fogkefét, amikor a fogaihoz teszi, és csak akkor vegye ki a szájából, amikor kikapcsolja.

☆ A fogkefefej cseréje

Telepítés: Csúsztassa a kefefejet lefelé a fogantyú felé. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő helyzetben van.

Eltávolítás: Tartsa erősen a fogantyút, és húzza ki a kefefejet a fogantyúból.

☆ Fogkefe töltése

- Ha a fogkefe első bekapcsolásakor alacsony töltöttségi szintet mutat, használat előtt győződjön meg róla, hogy teljesen feltöltötték.
- Ha a fogkefét több mint 3 hónapig nem használta, használat előtt töltsse fel teljesen a töltési utasításoknak megfelelően.
- Ha a kijelző használat közben gyorsan villog, az azt jelenti, hogy a fogkefe akkumulátora lemerült, ezért mielőbb töltsse fel.
- Amikor a fogkefét szeretné feltölteni, dugja be az USB-kábelt a fogkefe alján lévő töltőnyílásba, és győződjön meg róla, hogy a fogkefe biztonságosan csatlakozik az elektromos hálózathoz.

- A töltési folyamat során a töltésjelző fehéren világít és lassan villog. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kijelző két percre bekapcsol, és nem villog tovább, majd 2 perc után automatikusan kikapcsol. Ha a fogkefe teljesen feltöltődött, 25 napon keresztül naponta kétszer két percig használhatja.
- A fogkefe vízálló funkcióval rendelkezik, így biztonságosan használható a fürdőszobában.

☆ Módkok

- Első üzemmód: Fehér
- Ebben az üzemmódban a fehér jelzőfény a "Fehér" állásban világít, a fogkefe dőlése magas, és a rezgés intenzitása a legerősebb. Ez az üzemmód olyan felhasználók számára alkalmas, akiknek magas tisztítási teljesítményre van szükségük, és nincsenek érzékeny fogaik.
- A második mód: Tiszta
- Ebben az üzemmódban a fehér led a Clean (Tisztítás) állásban világít, a kefe mozgása normális, a rezgés intenzitása pedig közepes. A legerősebb tisztító hatás elérése és az egészséges szájhygiéna fenntartása érdekében standard szájüregi állapotra alkalmas.
- Harmadik mód: Érzékeny
- Ebben az üzemmódban a fehér jelzőfény az "Érzékeny" állásban világít, a kefemozgás lágy, a rezgés intenzitása pedig a legkíméletesebb az öt üzemmód közül, ami az érzékeny fogakkal rendelkező felhasználók számára alkalmas.
- A negyedik mód: Lengyel
- Ebben az üzemmódban a fehér jelzőlámpa a "Polírozás" állásban világít, a sörték mozgása és a rezgés intenzitása gyorsan változik. A szimulált hatás felhasználható a metszőfogak területének további kezelésére, ami fehéritő hatást eredményez.
- Ötödik üzemmód: Masszázs
- Ebben az üzemmódban a fehér jelzőlámpa "Masszázs" állásban világít, és a sörték mozgása és a rezgés intenzitása lassan változik.

Ez az üzemmód az erős és egészséges íny fenntartására szolgáló gyengéd stimulációra szolgál.

4. Specifikáció:

Üzemi hőmérséklet: 0-50°C

Működési feszültség: DC3,7V

Kefe anyaga: Nylon

Bemeneti feszültség: DC5.0V

Névleges teljesítmény: 2W

Vízállósági fok: IPX7

5. Óvintézkedések:

- A terméket engedély nélkül ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa.
- Súlyos parodontális betegségben szenvedő vagy szájsebészeti műtétet követő személyeknek használat előtt konzultálniuk kell orvosukkal.
- Gyermeket, csecsemőket és kezelhetetlen személyeket szülőnek vagy felnőttnek kell felügyelnie.
- Ne áztassa a terméket hosszabb időre vízbe.
- Ne tegye a fogkefét forró körülmények közé, és ne tegye ki napfénynek.
- Ne nyomja a sörtéket erősen a fogakhoz vagy az ínyhez.
- 12 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.